



nxt
SEATING

Conçu pour soutenir
tous vos mouvements

Classic

Dossier à support pelvien

Le dossier rigide Classic de NXT a été conçu pour offrir de la stabilité dans la région pelvienne aux utilisateurs ayant un bon contrôle au niveau du tronc, ou pour améliorer le soutien thoracique.

VUE D'ENSEMBLE

- A** Forme découpée au niveau des omoplates afin de permettre une plus grande liberté de mouvement.
- B** Cadre en un morceau en aluminium léger.
- C** Butées latérales offrant de la stabilité pelvienne aux utilisateurs ayant un bon contrôle au niveau du tronc.
- D** Les dossiers Classic peuvent être munis de butées latérales standard ou profondes. Le dossier Classic DEEP permet d'ajuster la profondeur entre 5,5 et 7 po (14 à 17,8 cm) pour un soutien et un positionnement médians optimaux.




smartx3D

LA TECHNOLOGIE SMARTX3D A RÉVOLUTIONNÉ LA CONCEPTION DES COUSSINS ET DOSSIERS RIGIDES NXT

Notre tissu innovant smartx3D offre un confort et une durabilité sans précédent. Ce tissu sophistiqué comprend une technologie à trois couches avec, entre la couche inférieure et la couche supérieure, un canal rempli d'air qui éloigne la chaleur et l'humidité.

Le smartx3D est un tissu doux, qui respire et chasse l'humidité, ce qui offre à l'utilisateur un confort inégalé.

- Doux et confortable
- Propriétés antimicrobiennes
- Immersion et enveloppement améliorés
- Réduction du cisaillement
- Circulation de l'air 20 fois supérieure à celle offerte par les matériaux traditionnels

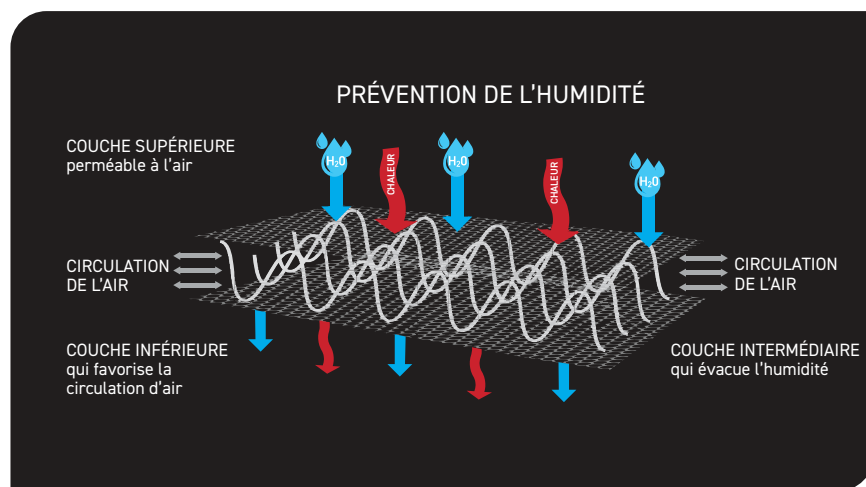

CARACTÉRISTIQUES



BARRE DE DÉCLENCHEMENT RAPIDE À UNE SEULE MAIN

Permet au dossier d'être retiré du fauteuil roulant facilement.



DÉCOUPAGE DU DOSSIER AU NIVEAU DU BASSIN

Permet aux fesses de se loger confortablement sous le dossier afin d'assurer un positionnement optimal et naturel en position assise.



smartGEL™ INFUSED VISCO TECHNOLOGY MOUSSE VISCO-ÉLASTIQUE À DOUBLE DENSITÉ INFUSÉE DE GEL SMARTGEL™

La technologie smartGEL permet de réduire la température à la surface en évacuant la chaleur pour plus de confort et une douceur accrue.

CLASSIC

CLASSIC DEEP





FOURNI AVEC LE DOSSIER

- Coussin lombaire en mousse Visco à densité double, incluant la technologie smartGEL
- Insertions pelviennes et lombaires
- Housse antimicrobienne smartx3D faite de polyester extensible dans les quatre sens (lavable)
- Quincaillerie : système de fixation QuickFit
- Barre de déclenchement rapide à une seule main

ACCESSOIRES ET OPTIONS

- Butées latérales
- Appui-tête
- Housse et mousse de recharge

Spécifications Techniques

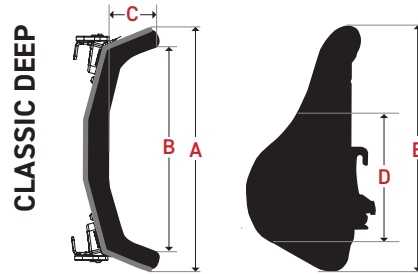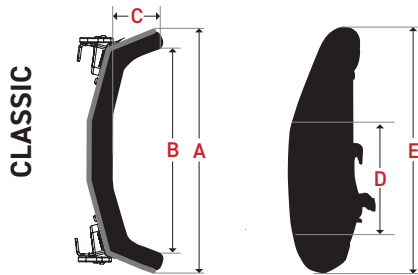

Dimensions des dossiers CLASSIC et CLASSIC DEEP

Largeur	Hauteur	Largeur du fauteuil
16 po (40,6 cm)	16 à 20 po (40,6 cm à 50,8 cm)	16 à 18 po (40,6 cm à 45,7 cm)
18 po (45,7 cm)		18 à 20 po (45,7 cm à 50,8 cm)
20 po (50,8 cm)		20 à 22 po (50,8 cm à 55,9 cm)
22 po (55,9 cm)		22 à 24 po (55,9 cm à 61 cm)

Spécifications CLASSIC

Poids*	2,6 lb (1,18 kg)
Hauteur	16 à 20 po (40,6 à 50,8 cm)
Largeur	16 à 22 po (40,6 à 55,9 cm)
Profondeur des butées	3 po (7,6 cm)
Capacité de poids	300 lb (136,08 kg) 400 lb (181,44 kg) pour les dossiers de 22 po de largeur

Spécifications CLASSIC DEEP

Poids*	3,3 lb (1,5 kg)
Hauteur	16 à 20 po (40,6 à 50,8 cm)
Largeur	16 à 22 po (40,6 à 55,9 cm)
Profondeur des butées	5,5 à 7 po (14 à 17,8 cm)
Capacité de poids	300 lb (136,08 kg) 400 lb (181,44 kg) pour les supports de 22 po de largeur

*Poids d'un dossier avec coquille de 16 po (40,6 cm).

*Poids d'un dossier avec cadre de 16 po (40,6 cm).

Dimensions du dossier CLASSIC – pouces (centimètres)

	16 x 16 (40,6 x 40,6)	16 x 18 (40,6 x 45,7)	16 x 20 (40,6 x 50,8)	18 x 16 (45,7 x 40,6)	18 x 18 (45,7 x 45,7)	18 x 20 (45,7 x 50,8)	20 x 16 (50,8 x 40,6)	20 x 18 (50,8 x 45,7)	20 x 20 (50,8 x 50,8)	22 x 16 (55,8 x 40,6)	22 x 18 (55,8 x 45,7)	22 x 20 (55,8 x 50,8)
A	13,5 (34,2)	13,5 (34,2)	13,5 (34,2)	15,5 (39,3)	15,5 (39,3)	15,5 (39,3)	17,5 (44,4)	17,5 (44,4)	17,5 (44,4)	19,5 (49,5)	19,5 (49,5)	19,5 (49,5)
B	11,75 (29,8)	11,75 (29,8)	11,75 (29,8)	13,75 (34,9)	13,75 (34,9)	13,75 (34,9)	15,75 (40)	15,75 (40)	15,75 (40)	17,5 (44,4)	17,5 (44,4)	17,5 (44,4)
C	3 (7,62)											
D	9,25 (23,4)	9,5 (24,1)	9,75 (24,7)	9,25 (23,4)	9,5 (24,1)	9,75 (24,7)	9,25 (23,4)	9,5 (24,1)	9,75 (24,7)	9,25 (23,4)	9,5 (24,1)	9,75 (24,7)
E	16 (40,6)	18 (45,7)	20 (50,8)	16 (40,6)	18 (45,7)	20 (50,8)	16 (40,6)	18 (45,7)	20 (50,8)	16 (40,6)	18 (45,7)	20 (50,8)

Dimensions du dossier CLASSIC DEEP – pouces (centimètres)


	16 x 16 (40,6 x 40,6)	16 x 18 (40,6 x 45,7)	16 x 20 (40,6 x 50,8)	18 x 16 (45,7 x 40,6)	18 x 18 (45,7 x 45,7)	18 x 20 (45,7 x 50,8)	20 x 16 (50,8 x 40,6)	20 x 18 (50,8 x 45,7)	20 x 20 (50,8 x 50,8)	22 x 16 (55,8 x 40,6)	22 x 18 (55,8 x 45,7)	22 x 20 (55,8 x 50,8)
A	15 (38,1)	15 (38,1)	15 (38,1)	17 (43,1)	17 (43,1)	17 (43,1)	19 (48,2)	19 (48,2)	19 (48,2)	21 (53,3)	21 (53,3)	21 (53,3)
B	13,25 (33,6)	13,25 (33,6)	13,25 (33,6)	15,25 (38,7)	15,25 (38,7)	15,25 (38,7)	17,25 (43,8)	17,25 (43,8)	17,25 (43,8)	19,25 (48,8)	19,25 (48,8)	19,25 (48,8)
C	5,5 à 7 (12,7 à 17,7)											
D	9 (22,8)											
E	16 (40,6)	18 (45,7)	20 (50,8)	16 (40,6)	18 (45,7)	20 (50,8)	16 (40,6)	18 (45,7)	20 (50,8)	16 (40,6)	18 (45,7)	20 (50,8)

Système de fixation QuickFit™

Permet un ajustement rapide et facile du dossier pendant que le client est assis dans le fauteuil.

- Les fixations peuvent être inversées (gauche, droite) pour une plus grande amplitude en matière de profondeur.
- Ajustement de la profondeur de 5 po (12,7 cm), soit 2,5 po (6,4 cm) devant et derrière les cannes de dossier.
- Facilement adaptable à des fauteuils plus larges (jusqu'à 2 po – 5,08 cm – plus larges que le dossier).
- Les fixations peuvent être installées et désinstallées sans être désassemblées complètement.
- Quincaillerie discrète assurant la solidité et la rigidité du dossier.
- Ajustable pour s'adapter à la rotation du bassin et du tronc.
- Convient aux cannes de dossier de 0,75 à de 1 po (1,9 à 2,5 cm).
- Ajustement d'angle de 25 degrés, antérieur et postérieur.

Système de fixation QuickFit

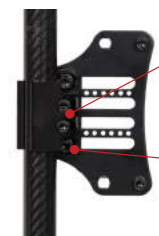

Attache la fixation à la canne de dossier, et ajustez la hauteur et la rotation.

Ajustez la profondeur et l'angle.

Supports fixes alternatifs



Support fixe à 2 points d'ancrage (NIB-1207)

Optionnel : Utiliser seulement sur les dossiers d'une hauteur de 16 po (40,6 cm) ou moins.



Support fixe à 4 points d'ancrage (NIB-1307)

Optionnel : La largeur n'est pas ajustable et ne convient qu'à une seule largeur de fauteuil.